

## Chegou o Auto Seal

A **EasyLife** é tão extraordinária que praticamente se ajusta sozinha.

Às vezes é normal esperar resultados imediatos. Por isso é que desenvolvemos a EasyLife com a revolucionária tecnologia Auto Seal.

Nós a chamamos de EasyLife. Você irá chamá-la de sua máscara favorita. Com sua tecnologia patenteada Auto Seal, a máscara nasal EasyLife praticamente elimina a necessidade de ajustes manuais. Seu projeto inovador e leve apresenta uma exclusiva composição com almofadado duplo: o almofadado interno cria uma vedação instantânea e autoajustável, enquanto que o almofadado externo proporciona um suporte confortável. Os únicos acertos manuais necessários são ajustes intuitivos do fixador da máscara, o que facilita ao máximo o ajuste. Ajudá-lo a adaptar 100% dos pacientes, 100% do tempo é, simplesmente, mais fácil com a EasyLife.

**PHILIPS**

**RESPIRONICS**


A almofada de testa ajusta-se automaticamente, eliminando uma etapa de ajuste tradicional, e requer uma força mínima por parte do fixador da máscara.



Apenas quatro peças: moldura da máscara, fixador da máscara, almofadado externo de sustentação, almofadado interno de vedação.

Microportas de expiração anguladas tornam a operação mais silenciosa e redirecionam o ar para longe do(a) companheiro(a) de cama.

O almofadado externo de sustentação permite que a máscara repouse suave e confortavelmente no rosto do paciente, eliminando a necessidade de apertar excessivamente o fixador da máscara.

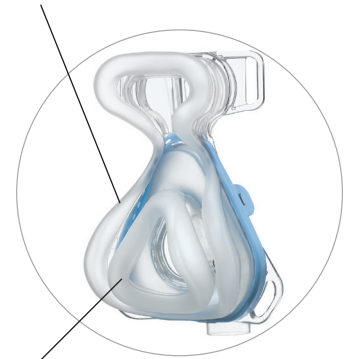

O almofadado interno de vedação cria uma vedação instantânea e autoajustável.

Informações para pedidos				
Máscara EasyLife	Pequeno	Médio	Médio-largo	Grande
Máscara com fixador	1050021	1050022	1050023	1050024
Máscara com fixador, sem porta de expiração	1050031	1050032	1050033	1050034
DuoPack (almofadado extra) com fixador de máscara	1050026	1050027	1050028	1050029
FitPack: máscara com fixador, mais almofadados pequeno e médio		1050088	N/D	N/D
FitPack: máscara com fixador, mais almofadados médio-largo e grande	N/D	N/D		1050089
Peças de reposição				Número da peça
Conjunto de almofadados nasais pequenos*				1050091
Conjunto de almofadados nasais médios*				1050092
Conjunto de almofadados nasais médio-largos*				1050093
Conjunto de almofadados nasais grandes*				1050094
Fixador da máscara EasyLife				1050095
Medição EasyLife				1050096

\* Um conjunto de almofadados inclui um almofadado interno de vedação e um externo de sustentação.

Respironics, AutoSeal, DuoPack, EasyLife e FitPack são marcas comerciais da Respironics, Inc. e de suas afiliadas, todos os direitos reservados.



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

A Philips Healthcare reserva-se o direito de realizar alterações em especificações ou de interromper a fabricação de produtos a qualquer momento, sem necessidade de avisos prévios ou obrigações outras, não sendo responsável por conseqüências resultantes do uso desta publicação.

RRD Brazil KB 11/24/09 MCI 4102980

A Philips Healthcare é parte integrante da Royal Philips Electronics

Respironics Europa, Oriente Médio, África  
+33 1 47 52 30 00

Respironics Ásia-Pacífico  
+65 6882 5282

Philips Respironics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668

Atendimento ao cliente  
+1 724 387 4000  
800 345 6443 (toll free, US only)  
www.philips.com/respironics